

DOCTIVE BLUE GEL

DOCTIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

O DOCTIVE BLUE GEL tem como função evidenciar placas bacterianas ou evidenciar infiltração em dentes que tenham sofrido algum tipo de fratura. O produto é indicado para procedimentos de evidenciação em clínicas odontológicas.

⚠ AVISO

Este produto pode ser foto ativado com a luz vermelha de baixa potência para atribuir o efeito Bactericida. Terapia Fotodinâmica (PDT)

COMPOSIÇÃO

Água destilada, Base para GEL de AZUL DE METILENO, Aroma e corante Alimentício.

COMPARAÇÕES ENTRE OS MODELOS

- **DOCTIVE BLUE GEL 0,05%** Possui 0,05% de concentração de AZUL DE METILENO.
- **DOCTIVE BLUE GEL 0,1%** Possui 0,1% de concentração de AZUL DE METILENO.


MECANISMO DE AÇÃO

O DOCTIVE BLUE GEL, quando em contato com o dente, é rapidamente absorvido, destacando as placas ou fraturas existentes.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

O DOCTIVE BLUE GEL é comercializado nos seguintes Kits:

Kit com 2und x 10g (Bisnaga gel):

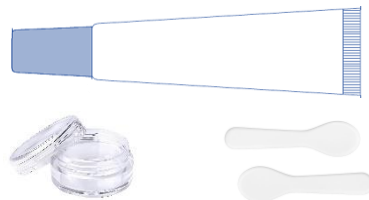

- 2 bisnagas – conforme ilustrado acima) com 10g de DOCTIVE BLUE GEL;
- 2 espátulas de aplicação;
- 1 pote cristal de aplicação – conforme ilustrado acima)

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local protegido de luz direta, calor e longe do alcance das crianças. Armazenar o produto em temperatura ambiente.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Abrir a embalagem externa e verificar se as embalagens bisnagas encontram-se intactas;
- 2) Abrir a embalagem bisnagas, somente no momento da aplicação do produto;
- 3) Com a bisnaga pode-se utilizar o pote cristal e as espátulas para facilitar a aplicação do gel nas áreas pretendidas;

- 4) Aplicar o produto diretamente sobre o local onde se deseja identificar a placa ou infiltrações;
- 5) Após 60 segundos, lave o local de aplicação com água e observe se a coloração azul é destacada nas áreas pretendidas;
- 6) Após a retirada da placa ou correção das infiltrações, o produto não deve permanecer junto aos dentes.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Utilização restrita do profissional Cirurgião Dentista;
- A aplicação deste produto deve estar restrita a área de tratamento;
- Este produto deve ser manipulado pelo operador com luvas de proteção.

EFEITOS COLATERAIS

Alguns pacientes podem experimentar certa irritação na língua em função ao contato de quantidades maiores do AZUL DE METILENO. O Corante azul pode fazer aparecer manchas de hipoplasia do esmalte (mancha azul opacas).

CONTRAINDICAÇÕES

- Não misturar esta substância com oxidantes fortes como permanganato e água oxigenada;
- Não injete, nem use o DOCTIVE BLUE GEL em vasos sanguíneos.

CUIDADOS

Utilizar o DOCTIVE BLUE GEL até a data de validade.

LIMITAÇÕES

Não há relatos de limitações.

VALIDADE

O produto possui validade de um ano.

ANVISA

Nº 83241559001

Responsável Técnico
Kristian Sales Vieira
CRQ nº 04432356

Fabricado e Distribuído por:
DOCTIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EPP
CNPJ: 55.212.579/0001-48
Praça Coronel Vitoriano, 110
Sala 2 Centro Taubaté – SP
CEP:12020 020

 /doctivebrasil
www.doctive.com.br