

DOCTIVE BLUE SOLUÇÃO

DOCTIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

O DOCTIVE BLUE solução tem como função evidenciar placas bacterianas ou evidenciar infiltração em dentes que tenham sofrido algum tipo de fratura. O produto é indicado para procedimentos de evidência em clínicas odontológicas.

⚠ AVISO

Este produto pode ser foto ativado com a luz vermelha de baixa potência para atribuir o efeito Bactericida. Terapia Fotodinâmica (PDT)

COMPOSIÇÃO

Água destilada, Base para solução de AZUL DE METILENO, Aroma e corante Alimentício.

COMPARAÇÕES ENTRE OS MODELOS

- **DOCTIVE BLUE solução 0,005%** Possui 0,005% de concentração de AZUL DE METILENO.
- **DOCTIVE BLUE solução 0,01%** Possui 0,01% de concentração de AZUL DE METILENO.


MECANISMO DE AÇÃO

O DOCTIVE BLUE solução, quando em contato com o dente, é rapidamente absorvido, destacando as placas ou fraturas existentes.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

O DOCTIVE BLUE solução é comercializado nos seguintes Kits:

Kit com 10und x 1,0mL (tubete de solução):

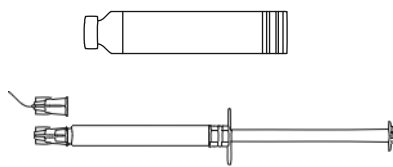

- 10 frascos tipo tubete – conforme ilustrado acima) com 1,0 mL de DOCTIVE BLUE solução;
- 10 ponteiros - bico de aplicação;
- 1 aplicador (tipo seringa – conforme ilustrado acima)

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local protegido de luz direta, calor e longe do alcance das crianças. Armazenar o produto em temperatura ambiente.

INSTRUÇÕES DE USO

1) Abrir a embalagem externa e verificar se as embalagens tubete ou seringas encontram-se intactas;

- 2)** Abrir a embalagem tubete ou seringa, somente no momento da aplicação do produto;
- 3)** Com o tubete pode-se utilizar uma seringa comum para retirar o produto ou inseri-lo num aplicador de anestésicos locais (comum em consultórios odontológicos). Com a seringa, basta colocar o bico aplicador, o qual segue com o produto;
- 4)** Aplicar o produto diretamente sobre o local onde se deseja identificar a placa ou infiltrações;
- 5)** Após 60 segundos, lave o local de aplicação com água e observe se a coloração azul é destacada nas áreas pretendidas;
- 6)** Após a retirada da placa ou correção das infiltrações, o produto não deve permanecer junto aos dentes.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Utilização restrita do profissional Cirurgião Dentista;
- A aplicação deste produto deve estar restrita a área de tratamento;
- Este produto deve ser manipulado pelo operador com luvas de proteção.

EFEITOS COLATERAIS

Alguns pacientes podem experimentar certa irritação na língua em função ao contato de quantidades maiores do AZUL DE METILENO. O Corante azul pode fazer aparecer manchas de hipoplasia do esmalte (mancha azul opacas).

CONTRAINDICAÇÕES

- Não misturar esta substância com oxidantes fortes como permanganato e água oxigenada;
- Não injete, nem use o DOCTIVE BLUE solução em vasos sanguíneos.

CUIDADOS

Utilizar o DOCTIVE BLUE solução até a data de validade.

LIMITAÇÕES

Não há relatos de limitações.

ANVISA

Nº 83241559001

VALIDADE

O produto possui validade de um ano.

Responsável Técnico
Kristian Sales Vieira
CRQ nº 04432356

Fabricado e Distribuído por:
DOCTIVE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EPP
CNPJ: 55.212.579/0001-48
Praça Coronel Vitoriano, 110
Sala 2 Centro Taubaté - SP
CEP:12020 020

 /doctivebrasil
www.doctive.com.br